


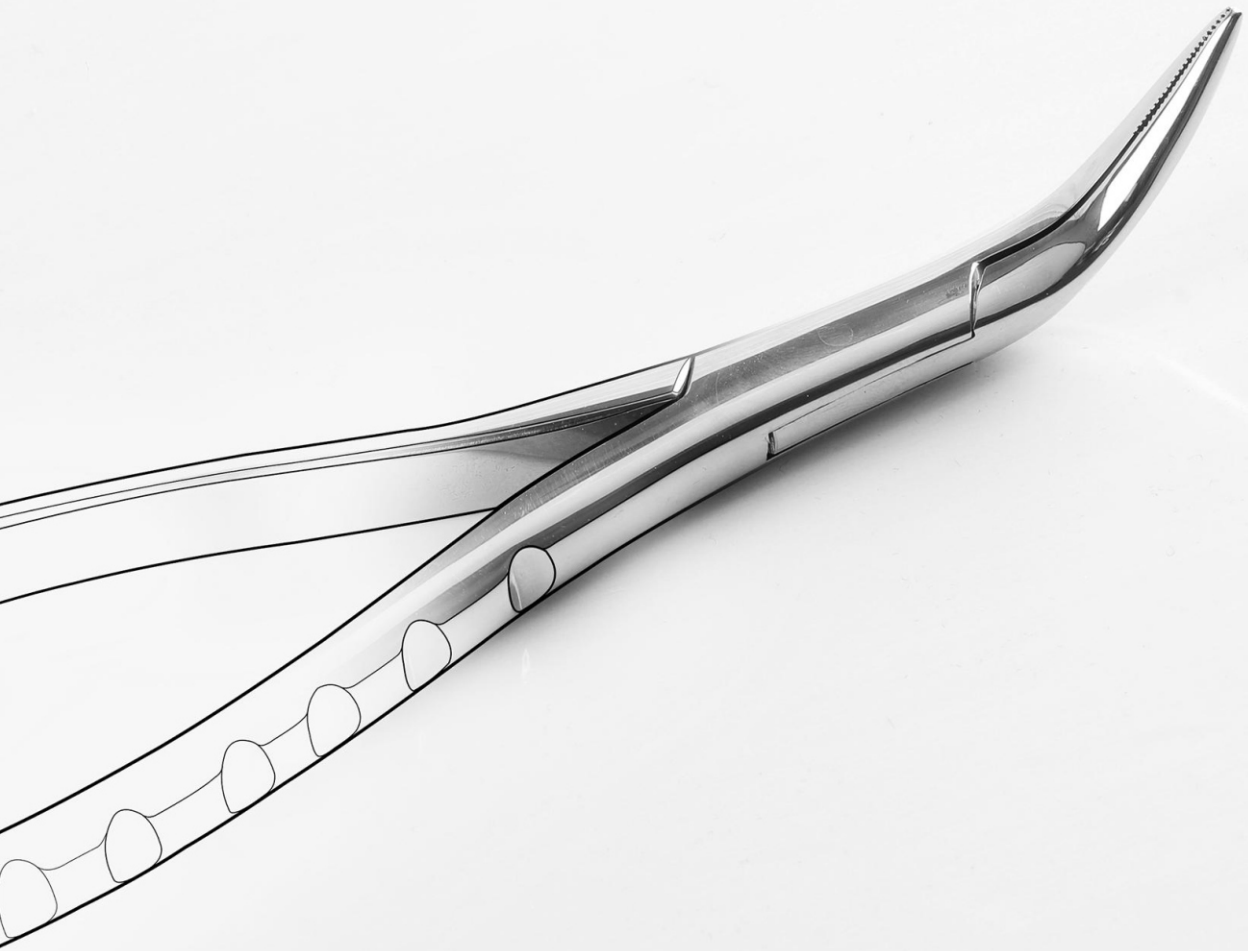

شرکت ابزارجراحی رادین

Henkel®

2021 CATALOGUE

مصرف‌کننده عزیز:

۱- رعایت اصول کامل شستشو و پاکسازی ابزار دندانپزشکی در اولین استریلیزاسیون، بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مرحله لازم است با استفاده از پارچه ای نرم آغشته به محلول ضد عفونی سطح ابزار جراحی را کاملاً شسته. سپس با برسی نرم کاملاً میان آج ها و دنده های ابزار را پاکسازی نمایید به گونه ای که لک و چربی خشکیده حاصل از اختلاط گرد و غبار و رطوبت هوا به طور کامل از سطوح صاف و آجدار ابزار دندانپزشکی زدوده شود.

۲- هرگونه تماس ابرزدندانپزشکی با محلولهای آلكالینی یا اسیدی خواص محافظتی سطوح ابزار را از بین برده به نحوی که در اکثر موارد منجر به خوردگی، شکستگی و ایجاد خلل و فرج در سطوح ابزار می شود. در این خصوص ترکیبات خاصی موجب خوردگی سطح استیل میگردند که حتی با وجود خواص محافظتی سطح استیل، خسارات جدی به آن وارد می سازند.

۳- استفاده از روغن های با قابلیت حل شدن در آب (حاوی پارافین) گاهی در طول عمر ابزار دندانپزشکی موثر است. هرگونه روغنکاری نه تنها از اصطکاک دوفلزی که بر روی هم قرار دارند ممانعت به عمل می آورد بلکه با ایجاد نوعی نرمی در عملکرد ابزار از هر نوع خوردگی ناشی از سایش و اصطکاک نیز جلوگیری می نماید. همچنین استفاده مستمر از مواد روغنی در ابزار دندانپزشکی، از چسبندگی قطعاتی که دارای لولا بوده ممانعت به عمل آورده و خود به خود کمک که سطح ابزار از انباشت و رسوب موارد معدنی و خونابه محفوظ بماند. توجه به این نکته ضروری است که به هیچ عنوان نمیتوان، ابزار دندانپزشکی آغشته به روغن های غیرقابل حل در آب را استریل نمود، بنابراین نباید از این گونه روغن ها در روغن کاری ابزار دندانپزشکی استفاده کرد.

۴- به هنگام تمیز کاری و شستشوی ابزار دندانپزشکی با دست به هیچ وجه از برس سیمی و یا پاک کننده هایی که دارای خواص سایندگی هستند استفاده نکنید. استفاده از این عوامل ضمن وارد آوردن خسارت به سطح محافظت کننده ابزار، با گذشت زمان منجر به ایجاد لک و خوردگی سطح ابزار نیز می شوند.

۵- هرگونه خوردگی منجر به زنگ زدگی استیل می شود. در حین انجام عملیات ضد عفونی، پاکیزه سازی و یا استریلیزاسیون. براده و میکرو ارگانسیم های حاوی زنگ. از یک ابزار به ابزار دیگر منتقل می شود. لذا جدا سازی ابزارهای زنگ زده و فاسد از دیگر ابزارها نه تنها از انتقال زنگ زدگی. بلکه از تاثیرات نا مطلوب ظاهری ابزارهای دیگر نیز جلوگیری می نماید.

۶- اگر ابزاری آغشته به خون شود، ضروریست قبل از خشک کردن با آب شسته شوند. توجه به این نکته ضروری است که خون و خونابه به تنهایی لکه هایی را بر روی ابزار ایجاد می نمایند که به سختی از بین می روند. بنابراین ضروریست ابزارها را پس از استفاده بصورت نمناک نگهداری نمود. برای این منظور میتوان ابزارها را در وان آب مقطر استریل قرار داد و یا روی آنها را با یک حوله نمناک پوشاند.

۷ موثرترین روش در حفظ و نگهداری از ابزارهای دندانپزشکی این است که آنها را از تماس با عوامل مشکل ساز دور نمود. استفاده از آب مقطر، تمیزکاری مقدماتی به صورت دقیق، استفاده از محلولها با PH خنثی، بازدید مستمر و اجرای کامل دستورالعمل صادره توسط تولیدکننده به کارایی هرچه بیشتر ابزار دندانپزشکی منجر گردیده و از ایجاد هر نوع لک و نقطه بر روی ابزار جلوگیری می نماید.

New Instruments:

All instruments are supplied non-sterile unless otherwise stated on label.
Remove all packaging including plastic protection sleeves on instrument tips.
Clean the new product either manually or mechanically prior to the initial sterilization.

Used Instruments:

Wherever possible, do not allow blood debris or bodily fluids to dry on instruments. For best result and to prolong the life of the medical device reprocess immediately after use. If they cannot be reprocessed immediately, use an enzymatic foam spray cleaner to help prevent soil from drying.

Preparation for decontamination:

Reprocess all instruments as soon as it is reasonably practical following use. Disassemble only where intended, without the use of tools unless specifically provided by the manufacturer. Where instructions for disassembly are required, these are available with the device.

Cleaning**Ultrasonic cleaning**

Use only validated and CE marked equipment. Always follow manufacturer's Instructions for use. Do not exceed maximum immersion time of 10 minutes is recommended.
Avoid over-crowding of instruments. Place heavier instruments at the bottom of the basket.
Handle 'sharps' (scissors, knives, chisels etc.) separately.
Keep joints open and ratchets unlocked.
Rinse instruments with water to remove cleaning solution.

Automatic Washer / Disinfector

Use only CE marked and validated washer-disinfector machines and low-foaming, non ionizing cleaning agents and detergents following the manufacturers' instruction for use, warnings, concentration and recommended cycles.
Load instruments carefully, with any box joints and hinges open and so that any fenestration in instruments can drain.
Place heavy instruments with care at the bottom of containers, taking care not to overload wash baskets.
Place instruments with concave surfaces facing down to prevent pooling of water.
Where available, use appropriate attachments to flush inside reamers and devices with lumens or cannula.
Ensure that soft, high purity water which is controlled for bacterial endotoxins is used in the final rinse stage.
Note: Automated cleaning may not be suitable for all lumens and cannula, in which case clean manually with a water jet gun, if available, and on appropriate brush (and stilette if provided) that reaches the depth of the feature. After manually cleaning, pass all devices through an automatic cleaning cycle to achieve disinfection.

Note: These instructions have been validated using a washer-disinfector cycle validated to include two cold rinses at <35°C, a detergent cycle and a rinse cycle both at >50°C, a disinfection cycle operating at a temperature of between 80°C and 87°C for @ minimum holding time of 1 minute (actual holding time in excess of 2 minutes 50 seconds) and a 20 minute drying cycle. The detergent used was a low foaming, non-ionizing spray wash detergent cleaner (max 12 pH) and the rinse aid a neutral pH low foaming, non-ionic surfactant with isopropyl alcohol.

Manual Cleaning

Use a double sink system (wash/rinse) dedicated for instruments cleaning (not used for hand washing).

In the first sink (wash), keeping the instrument submerged, with an autoclavable brush, apply CE marked cleaning solution to all surfaces until all soil has been removed.

In the second sink (rinse), rinse instruments thoroughly with soft, high purity water which is controlled for bacterial endotoxins, so that the water reaches all parts of the instrument, then carefully dry or use a drying cabinet.

Ensure that the water temperature does not exceed 35°C.

Always brush away from the body and avoid splashing.

Pay particular attention to serrations, knurling, hinges, ratchets and tubes. Ensure hinged instruments are thoroughly cleaned in both open and closed position.

Clean delicate instruments separately to avoid damage.

Do not use steel wool or steel wire brushes.

Use only CE marked detergents with neutral pH (7).

Note: Manual cleaning is NOT a disinfection process.

Inspection and Maintenance

After cleaning, visually inspect all surfaces, cannulation, ratchets, joints, holes and lumens for complete removal of soil and fluids. If ANY soil or fluid is still visible, return the instrument for repeat decontamination.

Lubrication: Apply surgical grade lubricants to hinges, joints and moving parts as per the lubricant manufacturer's instructions. Use only a non-silicon water-soluble lubricant, not industrial type.

Visually inspect and check: All instruments for damage and wear;

cutting edges are free of nicks and present a continuous edge; jaws and teeth align correctly; all articulated instruments have a smooth movement without excess play; locking mechanisms (such as ratchets) fasten securely and close easily; long, slender instruments are not distorted; any component parts fit and assemble correctly with mating components.

Remove for repair or replacement any blunt, worn out, flaking, fractured or damaged instruments.

***Note:** If an instrument is returned to the manufacturer/supplier, the instrument must be decontaminated and sterilized and be accompanied with the relevant documented evidence.

Packaging: All instruments to be packed according to method of sterilization used following national and international standards.

Cold Disinfection

Use only CE marked products.

Do not use bleach (sodium hypochlorite)

Follow all manufacturers instructions and warnings.

Rinse thoroughly after disinfection under running water.

Note: Disinfection is not an alternative to sterilization

Sterilization

Steam Sterilization

Use only CE marked and validated vacuum autoclaves.

Always follow manufacturer's instructions for use.

Ensure instruments are fully clean, dried and lubricated

Use packaging materials as specified by EN 868 and ISO 11607.

Do not exceed manufacturer's stated load.

Recommended temperature and time:

134°C - 137°C 2.25 bar for minimum 3 minutes.

Do not exceed 140°C

Dry Heat Sterilization

Use only CE approved dry heat sterilizers.

Always follow manufacturer's instructions for use.

Recommended temperature:

160°C do not exceed 180°C

***Note: Other forms of sterilization (i.e. Low temperature steam and Formaldehyde, Ethylene Oxide and Gas Plasma) are available. However, always follow the instructions for use as issued by the manufacturer and always consult with them if in any doubt over the suitability of any process used.**

Storage

Ensure instruments are dry before storage, and stored in dry, clean conditions 'at an ambient room temperature.

***NOTE: IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE PROCESSOR TO ENSURE THAT THE REPROCESSING AS ACTUALLY PERFORMED USING EQUIPMENT, MATERIALS AND PERSONAL IN THE REPROCESSING FACILITY ACHIEVE THE DESIRED RESULT. THIS REQUIRES VALIDATION AND ROUTINE MONITORING OF THE PROCESS. LIKEWISE ANY DEVIATION BY THE PREPROCESSOR FROM THE INSTRUCTIONS PROVIDED MUST BE PROPERLY EVALUATED FOR EFFECTIVENESS, AND POTENTIAL ADVERSE CONSEQUENCES.**

Examination Kit | ست معاینه

C1400
examination set
ست معاینه ۴ عددی
Content: اجزا:
دسته آینه | سر آینه | سوند | پنس
کدها: ۱۴۰۱ - ۱۴۱۰ - ۱۴۲۱ - ۱۴۵۱



Explorers and Probes | سوندها



C1402
سوند دوسر هالو



C1404
سوند اندو بلند یکسر



G3095
williams مدرج



C1401
سوند دوسر ساده



C1403
سوند داسی یکسر



C1405
سوند اندو

Mouth Mirrors

سر آینه ۱۲ عددی
Pack of 12 Pieces



0.22 mm
سر آینه شماره ۴
بدون دور نما
C1420



0.24 mm
سر آینه شماره ۵
بدون دور نما
C1440



0.22 mm
سر آینه شماره ۴
ساده
C1421



0.24 mm
سر آینه شماره ۵
ساده
C1441



Front Surface



Magnifying



Plane

	Front Surface	Magnifying	Plane
Fig.04	1420	ذره بینی 1421	1421
Fig.05	1440	1442	1441

Mirror Handles | سرآینه



C1410
دسته آینه ساده



C1412
دسته آینه هالو

Tweezers | پنسها



College Locking C1452
پنس قفل دار



Meriam C1451
پنس دوخم



Perry C1453
پنس گوتا

Extraction Forceps | فورسپس بزرگسال



Fig. 2



A1002
سانترال بالا

Fig. 7



A1003
پرمولر بالا

Fig. 17



A1004
مولر بالا راست

Fig. 18



A1005
مولر بالا چپ

Fig. 51A



A1006
ریشه کش بالا

Fig. 67



A1007
عقل بالا

Fig. 89



A1008
کاهورن بالا راست

Fig. 90



A1009
کاهورن بالا چپ

Fig. 13



A1010
پرمولر پایین

Fig. 22



A1011
مولر پایین

Fig. 33A



A1012
ریشه کش پایین

Fig. 79



A1013
عقل پایین

Fig. 86A



A1014
کاهورن پایین

Fig. 86C



A1015
کاهورن پایین محدب

Fig. 97



A1019
ریشه کش بالا بلند

Fig. 29



A1021
ریشه کش سانترال بالا

Extraction Forceps | فورسپس بزرگسال



A1022
ریشه کش بالا باریک



A1024 Witzel
ریشه کش بالا ویتزل



A1025
ریشه کش ویژه



A1040
مولر پایین راست
Routourer



A1041
مولر پایین چپ
Routourer



A1042
کاهورن پایین راست
Routourer



A1043
کاهورن پایین چپ
Routourer



A1026
عقل نهفته



A1062
روکش فک پایین



A1063
روکش پلایری



A1064
روکش فک بالا



A1000
Set of Adults Forceps
ست فورسپس بزرگسال ۱۱ عددی

Fig.:

86A | 79 | 67 | 51A | 33A | 22 | 18 | 17 | 13 | 7 | 2

Codes:

1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1010 - 1011
1012 - 1013 - 1014




A1050
Set of Children Forceps
ست فورسپس اطفال فنردار ۷ عددی

Fig.:


51S | 7 | 6 | 5 | 3 | 137 | 139

Roots Elevator | الواترها

الواترهای پاشنه‌ای Luxation Elevators

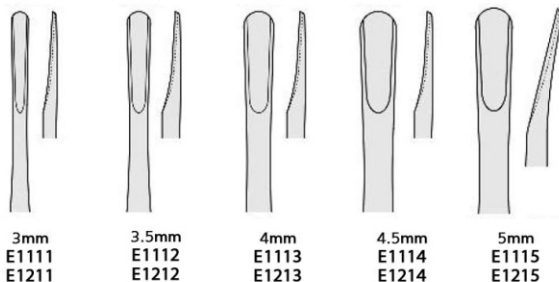


الواترهای مستقیم Bein Elevators Round Tips

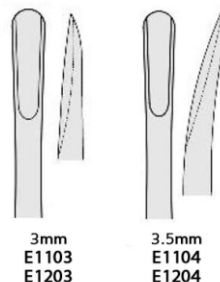

کدهای E11XX
الواترهای ساده


کدهای E12XX
الواترهای آلیاژ فرانسوی

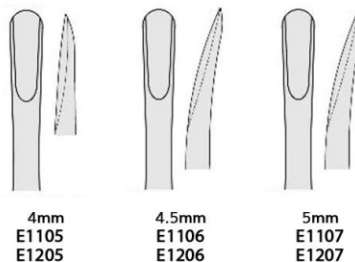


Elevators Set
ست الواتر آلیاژ فرانسوی
1262 - 1261 - 1252 - 1251
1212 - 1205 - 1203

Roots Elevator | الواترها


Flohr | الواترهای سوزنی

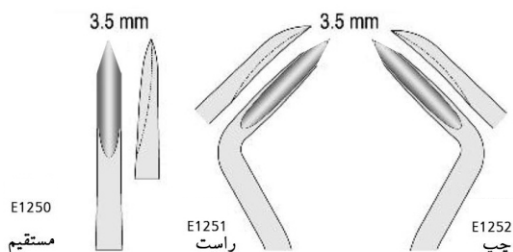


Apical | الواترهای اپیکال

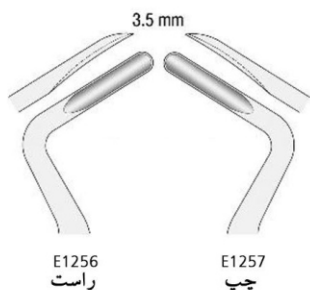


الواترهای دنده‌ای

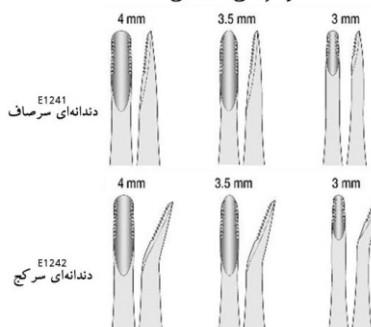


Cryer | الواترهای پرچمی

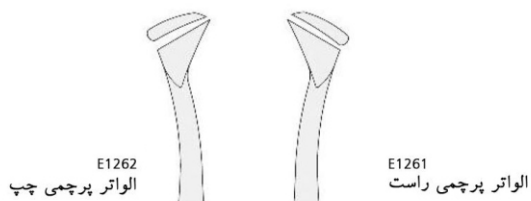


Winter Elevators الواترهای دسته صلیبی

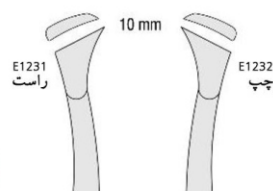

Heide Brink | الواترهای مخصوص ریشه

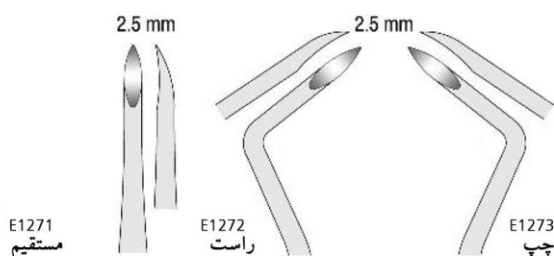

Warwick-James Elevators الواترهای اطفال

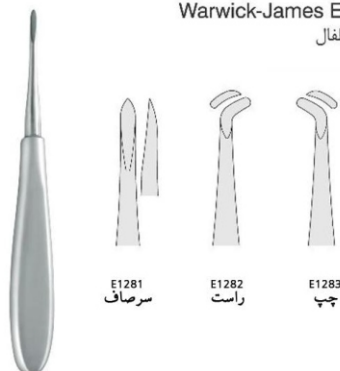

کورت های سینوس لیفت | Sinus Lift Currettes



Fig. 1
Q8001



Fig. 2
Q8002



Fig. 3
Q8003



Fig. 4
Q8004

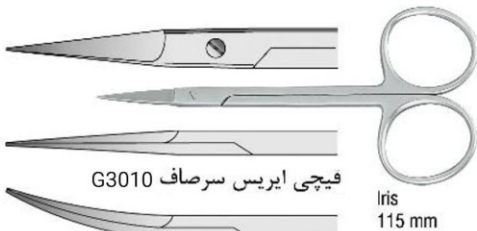


Fig. 5
Q8005



Fig. 6
Q8007

جراحی دندان | Dental Surgery




فیچی ایریس سرصاف G3010


Iris
115 mm

فیچی ایریس سرکج G3011

Crown Scissors | فیچی کروان بر

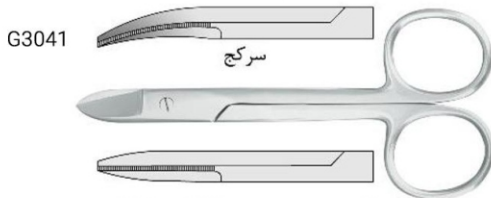


سرکج

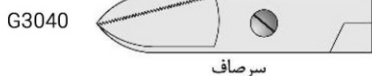

سرساف



دسته بیستوری ۳ ساده G3060

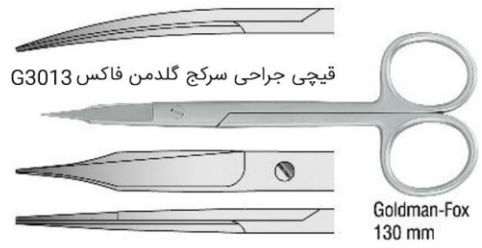

فیچی جراحی سرکج گلدمن فاکس G3013

فیچی جراحی سرصاف گلدمن فاکس G3012

Goldman-Fox
130 mm



فیچی متز سرکج ۱۶ سانت G3043

فیچی متز سرصاف ۱۶ سانت G3042


Metzenbaum

G3050
1.8 ml
مرنگ تزریق کمرشکن
Folding Syringes

G3051
1.8 ml
سرنگ تزریق ثابت
Fix Syringes



Surgery Instruments | ابزار جراحی

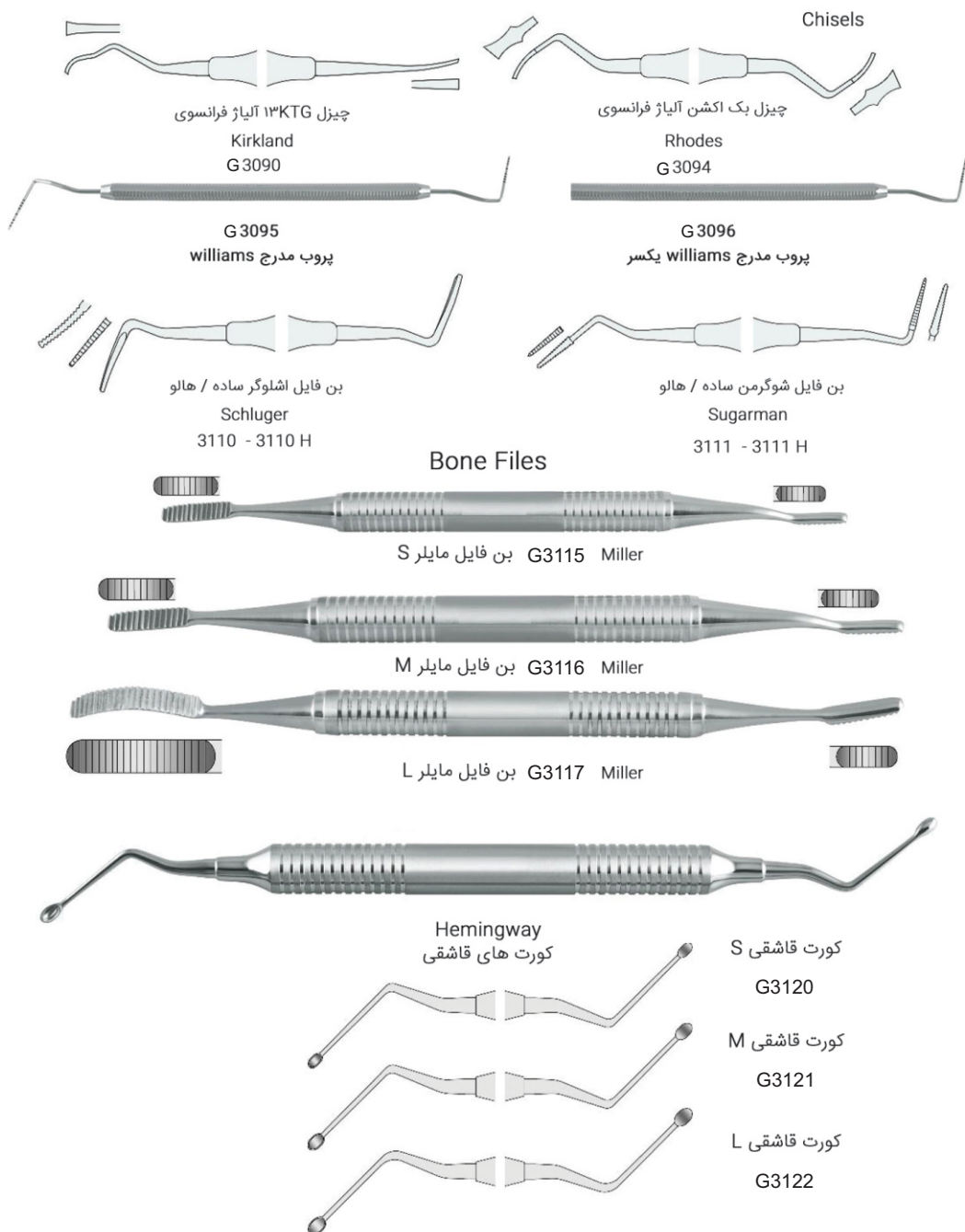

جراحی دندان | Dental Surgery



رانژور 12mm

G3065

Rongeurs

Friedmann

رانژور 14mm

G3066

Rongeurs



Periodontal Elevators الواتور پریوست G3070



Prichard Elevators الواتور پریوست پریچارد G3073



سرساکشن فیلتردار

G3086

Bone Collectores



سرساکشن فلزی 12cm

G3082

Suction Tube

سرساکشن فلزی 14cm

G3084



G3096

پروب مدرج williams یکسر who



G3097

پروب مدرج williams یکسر ساده



همزن آلژینات / گچ سر صاف H2801

Plaster Spatulas

همزن های دسته چوبی



همزن آلژینات و گچ سر کج H2802



چاقوی گچ Plaste Knife H2804

اسپاتول موم ناودانی S H2810

اسپاتول موم ناودانی L H2811

اسپاتول موم بدون شیار S H2812

اسپاتول موم بدون شیار L H2813



H2813



H2812



H2811



H2810

Wax Knives
Wooden Handle



اسپاتول لایکرون Lecron H2828

Calipers Iwanson
H2845 گج فلز



Calipers Iwanson
H2846 گج موم



Needle Holder, Retractors | سوزنگیر و رترکتور


Needle Holder



I4051
سوزنگیر سر صاف ۱۲cm
Needle Holders
Mayo-hager 12cm



I4052
سوزنگیر سر کج ۱۲cm
Needle Holders
Mayo-hager 12cm

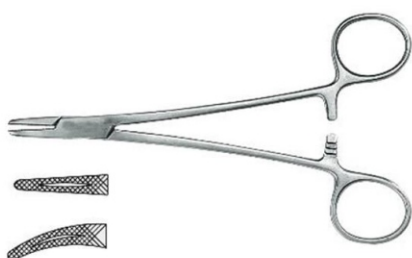

I4061
سوزنگیر سر صاف ۱۴cm
Mayo-hager 16cm - Str



I4064
سوزنگیر سر صاف ۱۶cm
Mayo-hager 16cm - Str

I4062
سوزنگیر سر کج ۱۴cm
Mayo-hager 16cm - Crd

I4065
سوزنگیر سر کج ۱۶cm
Mayo-hager 16cm - Crd




رترکتور مینه سوتا
Minnesota
I4010




رترکتور فارابوف
Farabeuf
I4011

Burnishers

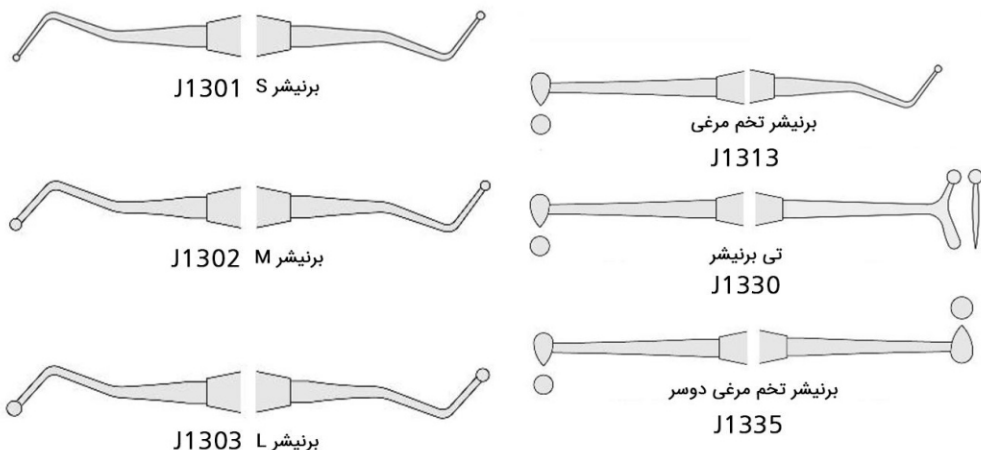

Pluggers

کندانسورهای آمالگام

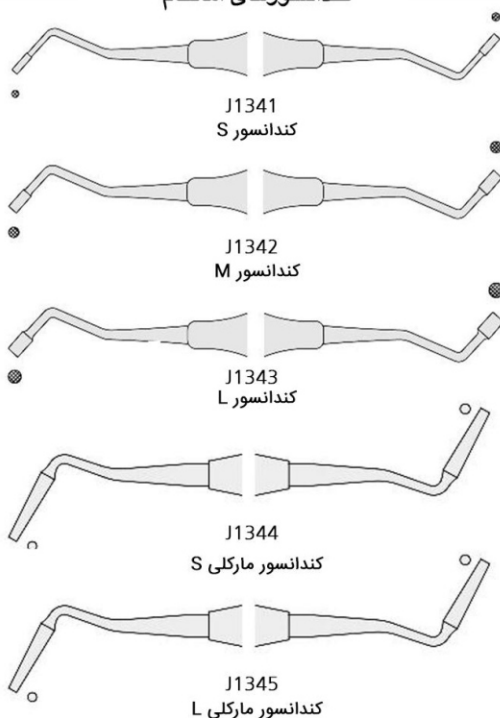


ترمیمی | Restorative Excavator



Spatulae اسپاتول های محکم



Carvers

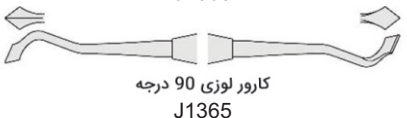

ترمیمی | Restorative

Filling Instruments



Manual Crown Remover
آرچ کروان ساده
J1381




J1390
آمالگام کریبر




J1390-1
آمالگام کریبر




Amalgam Well
گوده آمالگام
J1391

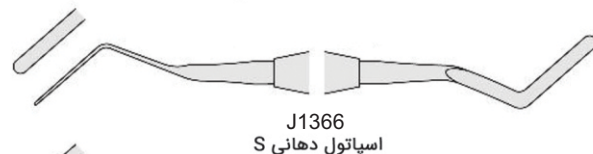


J1366
اسپاتول دهانی S

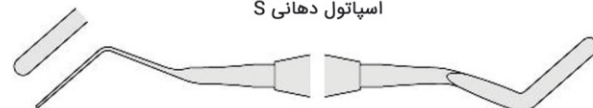


J1367
اسپاتول دهانی M
Hidemann

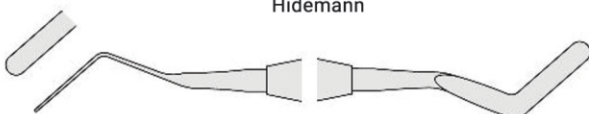

J1368
اسپاتول دهانی L
Hidemann

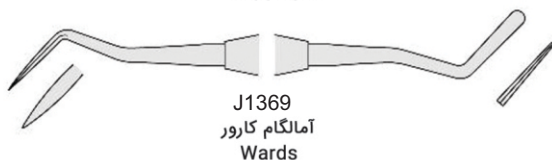

J1369
آمالگام کارور
Wards

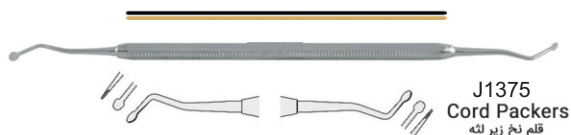

J1375
Cord Packers
قلم ریج زیر لثه

Placement Instruments



قلم دایکال یکسر
Dycal S/E
J1397



قلم دایکال دوسر
Dycal S/E
J1398

کریبر | Carriers Dental

ام تی کریبر سر صاف لیزری
K2901
ام تی کریبر سر کج لیزری
K2902



ارتودنسی Orthodontic



پلایر ۱۳۹
Round 02601



Bond Remover
Plierr
TC پلایر بند ریمور
02610



پلایر جانسون
02612



پلایر نوک مرغی
02613



بنس براکت
02657



پلایر T-Shape-Stop
02620



لیگاتور تریدر
02660



لیگاتور دایرکتور
02661



بند پوشر
02665



بند ستر پلاستیکی
02666



سوزنگیر متیو
Mathieu - Kocher TC
02680



سوزنگیر متیو
Mathieu
02681



وایر کاتر TC
02690



اندکاتر TC
02695

جعبه ابزار اندودنتیک | Endo Rescue

K1414

ابزار در آوردن فایل



قلم کامپوزیت روکش تیتانیوم
Titanium Nitride Lined



J1501 Plastic Filing

اسپاتول دهانی باریک



J1502 Plastic Filing Rigid

اسپاتول دهانی کوچک



J1503 Plastic Filing

اسپاتول دهانی پهن



J1504 Plastic Filing Rigid

اسپاتول - برنیشر



J1505 Condenser & Heidemann Spatula Rigid

اسپاتول دهانی متوسط



J1506 Plastic Filing Rigid

اسپاتول دهانی بزرگ



J1507 Wescott S

وسکوت کوچک



J1508 Wescott - L

وسکوت بزرگ



J1509 Freedoman Cone Shape & Condanser

کندانسور مارکلی



J1510 Smooth Plugger

کندانسور مخروطی



J1511 Burnisher _ L

برنیشر



J1512 Plugger / Heleomolar



J1513 Condenser & Mini Spatula / Placer

اسپاتول محکمه / برنیشر



J1514 Flexible Curved Paddle



J1515 Flexible

اسپاتول دهانی هالو



J1516 Flexible Curved Paddle

اسپاتول دهانی هالو



J1517 Heidemann & Cement Spatula (Curved)

اسپاتول محکمه سرکج




J1518 Lademore



Condenser & Mini Spatula / Placer J1519

اسپاتول محکمه سرکج هالو

رابطه دم کلمات و قیچی | Rubber dam Clamps & Forceps

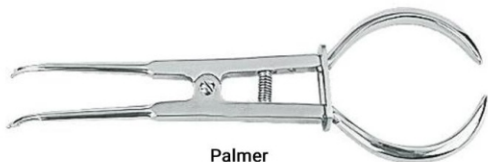

Palmer
فورسپس کلمپ یک خم
L1751



Matrix Pliers
فورسپس سکشنال ماتریس
L1753



Ainsworth
فورسپس پانچ رابط دم
L1754



کلمپ پرمولر پایین کوچک
L1763



کلمپ پرمولر بالا و پایین کوچک
L1764



کلمپ پرمولر بالا و پایین بزرگ
L1765



کلمپ مولر بالا و پایین کوچک
L1766



کلمپ مولر پایین
L1767



کلمپ مولر بالا کوچک
L1768



کلمپ مولرهای
نیمه روییده و کوچک
L1769



کلمپ یونیورسال
لبیال کوچک (پرمولر و قدامی)
L1770



کلمپ مولر بالا، چپ و راست
L1771



کلمپ مولر بالا، چپ و راست
L1772



کلمپ مولر بالا و پایین بزرگ
L1773



کلمپ مولرهای
نیمه روییده و بزرگ
L1774



کلمپ ۲۰۰
L1775



کلمپ مولر پایین با باله
L1776



مولر بالا بزرگ
L1777



کلمپ پرمولر بالا و پایین با باله
L1778



کلمپ ۲۰۷
L1779



کلمپ پرمولر پایین کوچک
L1780



کلمپ لبیال سانترال
L1781



کلمپ یونیورسال لبیال
L1782



کلمپ لبیال قدامی
L1783

Sterilization | ظروف استیل



گیره فیلم تکی
X-Ray Clip
P2501



جای پنبه فندار گرد
Cotton Holder
P2511



جای پنبه درب دار S
Cotton Container S
P2515



جای پنبه درب دار L
Cotton Container L
P2516



جای پنبه فندار رنگی
Cotton Holder Aluminum
P2512

Instruments Trays



Tray
سینی درب دار یک طرف سوراخ دار
P2541



Tray
سینی درب دار دو طرف سوراخ دار
P2542



Kidney Trays
S رسیور P2521
M رسیور P2522
L رسیور P2523



Instruments Trays
S سینی معاینه P2551
M سینی معاینه P2552
L سینی معاینه P2553



Forceps Jar
چیتل
P2533



Trays With Lid
دیش درب دار S P2554
دیش درب دار L P2556



Tray Cassetts
سینی درب دار ابزار
P2558



Galipots
گالی پات S P2563
گالی پات M P2564
گالی پات L P2565



Drums
بیکس گاز S P2582
بیکس گاز M P2583



چراغ الکلی قابل تنظیم
P2528

فورسپس های اطفال فنردار Extraction Forceps Children



فورسپس های اطفال فنردار



Fig. 1

A1051
سانترال بالا



Fig. 2

A1052
پرمولر بالا چپ و راست



Fig. 3

A1053
مولر بالا



Fig. 4

A1054
ریشه کش بالا



Fig. 5

A1055
پرمولر پایین



Fig. 6

A1056
مولر پایین



Fig. 7

A1057
ریشه کش پایین



A1050

Set of Children Forceps

ست فورسپس اطفال فنردار ۷ عددی

Fig.:

3 | 5 | 6 | 7 | 51S | 137 | 139

قلم های ایمپلنت | Implants Instruments



PDL 01
Q8501



PDL 02
Q8502



PDL 03
Q8503



PDL 04
Q8504



PDL 05
Q8505



Q7675
قلم پروتوم طلایی دوسر

Osteotoms with Stop Concave

استوتوم ها



2.7 mm
Q8101



3.2 mm
Q8102



3.7 mm
Q8103



4.2 mm
Q8104



5 mm
Q8105



2.7 mm
Q8201



3.2 mm
Q8202



3.3 mm
Q8203



4.2 mm
Q8204



5 mm
Q8205



Concave
Head

ست 5 عددی استوتوم سرصاف
Q8100

ست 5 عددی استوتوم سرکج
Q8200

هموستات / Forceps | هموستات

هموستات سر صاف ۱۲cm I4068

Halsted Mosquito Crile

هموستات سر کج ۱۲cm I4069

هموستات سر صاف ۱۴cm I4070

هموستات سر کج ۱۴cm I4071

Halsted Mosquito Crile
موسکیتو سر صاف ۱۱cm I4075

Halsted Mosquito Crile
موسکیتو سر صاف ۹cm I4078

Halsted Mosquito Crile
موسکیتو سر کج ۱۱cm I4076

Halsted Mosquito Crile
موسکیتو سر کج ۹cm I4079

Towel Forceps

شانگیر ۹ سانتی متری I4080
شانگیر ۱۱ سانتی متری I4081


هموستات بریج گیر I4085

هموستات و سوزنگیر


Needle Holder - Haemostatic / Forceps



Splinter Forceps
Stieglitz

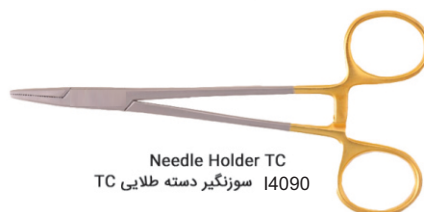

Needle Holder TC
I4090 سوزنگیر دسته طلایی TC

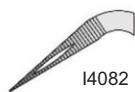

I4082

سوزنگیر سه کاره ۴۵ درجه



I4083

سوزنگیر سه کاره ۹۰ درجه



I4084

سوزنگیر سه کاره سرصاف



Mayo-Hegar
0.5 / 144 mm




Castroviejo Needle Holder TC
سوزنگیر کاستروویجو سرصاف TC
14 cm
I4095




Castroviejo Needle Holder TC
سوزنگیر کاستروویجو سرکج TC
I4096

هندپلاگر | Pluggers

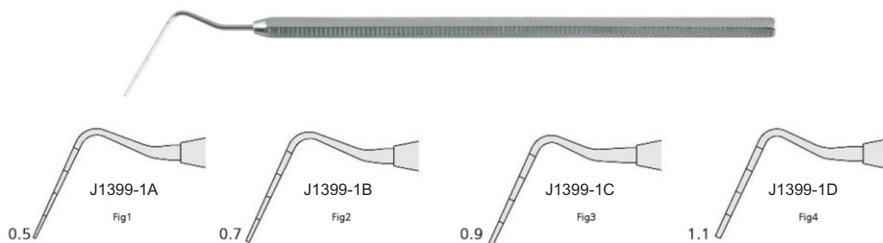


ست هندپلاگر ۴ عددی

هند اسپریدر | Spreaders

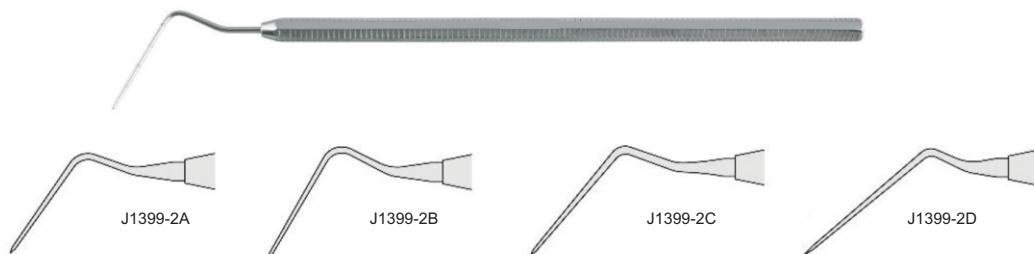

هیت کریر | Pluggers / Heat Carriers

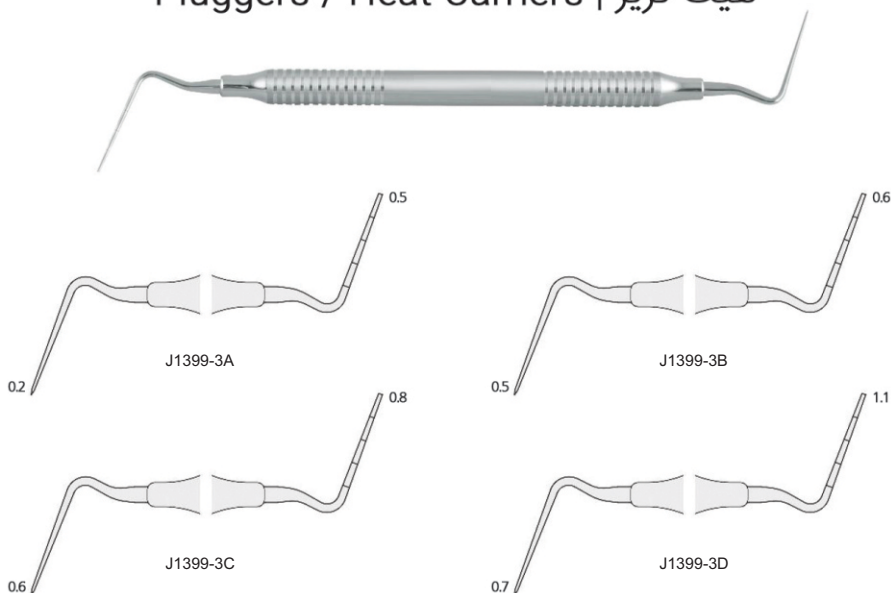



شرکت ابزار جراحی رادین

آدرس کارخانه : گیلان ، رشت ، شهر صنعتی رشت ،
انتهای ورودی اول ، شرکت ابزار جراحی رادین
تلفن: ۰۱۳۳-۳۸۸۳۱۰۳۰ کدپستی: ۴۳۳۷۱۸۴۷۹۳
info@radinsurgical.com

WWW.RADINSURGICAL.COM